


Capnographe EMMA™

Capnographie en temps réel portable



Taille réelle


Mesures

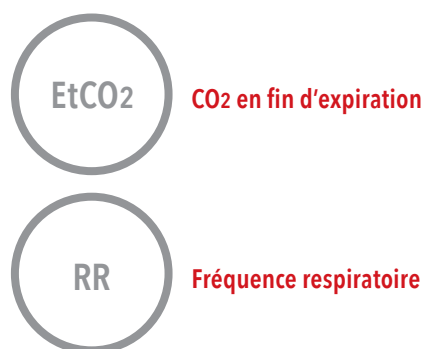

- > **Résultats immédiats** – Délai de préchauffage minimum – mesures d'EtCO₂, de la fréquence respiratoire (FR) et affichage du capnogramme dans les 15 secondes
- > **Capnographe ultra portable** – Compact et léger, tient dans la main afin d'offrir une mobilité et un confort d'utilisation inégalés pour un monitoring ponctuel de l'EtCO₂ chez les adultes, les enfants et les nouveau-nés
- > **Conçu pour s'adapter facilement au circuit de ventilation** – Souplesse d'utilisation pour de nombreux environnements de soins, dont la médecine d'urgence, le bloc opératoire, les unités de soins intensifs et les soins de longue durée
 - Dans une étude (publiée dans *Circulation*), des chercheurs ont déclaré que « la capnographie en continu est recommandée pour la confirmation et le suivi du placement d'un tube endotrachéal ».¹
- > **Conception robuste** pour une utilisation fiable dans les environnements difficiles
- > **Maintenance facile** – Aucune calibration de routine requise

Caractéristiques

- > **Capnogramme lisible et continu**
des mesures de dioxyde de carbone
- > **Interface simple, facile à utiliser**
pour une configuration rapide et une programmation one-touch
- > **Alarme sonore et visuelle**
pour adaptateur manquant, adaptateur obstrué, absence de respirations (apnée), batterie faible et dépassement des seuils d'alarmes paramétrables de l'EtCO₂
- > **Jusqu'à 10 heures d'autonomie**
en utilisation normale avec deux piles lithium AAA standard

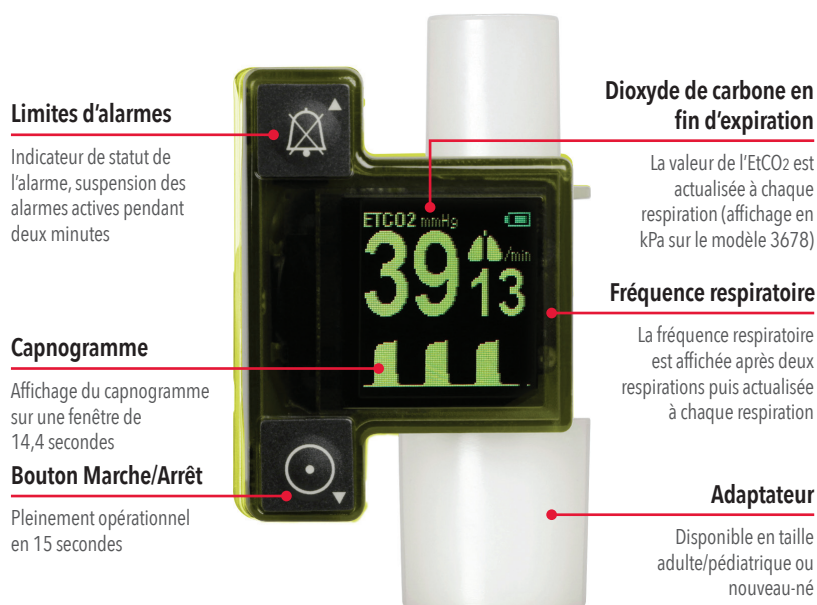

Spécifications


PLAGES	CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
CO ₂ 0 - 99 mmHg 0 - 9,9 kPa	Température de fonctionnement -5 °C à 50 °C (23 °F à 122 °F)
FR 3 - 150 bpm	Pression atmosphérique de fonctionnement 70 à 120 kPa
PRÉCISION (CONDITIONS STANDARDS)	Humidité de fonctionnement 10 % à 95 %, sans condensation
CO ₂ 0 - 40 mmHg ± 2 mmHg ; 41 - 99 mmHg 6 % de la mesure	Température de stockage -30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F)
FR ± 1 bpm	Pression atmosphérique de stockage 50 à 120 kPa
BATTERIE	CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Type 2 piles alcalines ou lithium de type AAA	Dimensions 5,2 cm x 3,9 cm x 3,9 cm (2,1 po x 1,5 po x 1,5 po)
Autonomie 6 heures (alcaline) 10 heures (lithium)	Poids 59,5 g (2,1 onces) (avec des piles alcalines)
	INFORMATIONS RELATIVES À L'ADAPTATEUR
	Espace mort adulte/pédiatrique 6 ml
	Espace mort nouveau-né 1 ml

Kit




- > **Kit EMMA***
EMMA(mmHg) Réf. 3639
EMMA(kPa) Réf. 3678

Accessoires

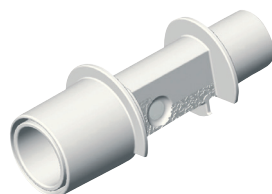

- > **Adaptateur EMMA**
Adulte/Pédiatrique
Boîte de 25
Réf. 17448

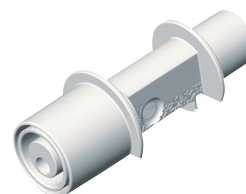

- > **Adaptateur EMMA**
Nouveau-né
Boîte de 10
Réf. 17449

*Le kit EMMA requiert l'utilisation d'un des adaptateurs répertoriés ci-dessus. Le kit contient l'EMMA, une pochette et un cordon.

¹ Neumar RW et al. *Circulation*. 2010;122:S729-S767.

Pour un usage professionnel. Voir le mode d'emploi pour obtenir des informations de prescription complètes, dont des indications, contre-indications, avertissements et précautions.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

